

NF-WALKER 2

Designed for *movement*. Loved by users.

Die Welt
entdecken!

 made for
movement

Der NF-WALKER 2 bietet Kindern mit Bewegungsstörungen die unschätzbare Möglichkeit, ihren **Bewegungsdrang in aufrechter Haltung auszuleben.**



AUFRECHT STEHEN GEHEN

Die meisten Kinder unternehmen zwischen dem neunten und zwölften Lebensmonat erste Steh- und Gehversuche.

Die aufrechte Haltung und die Möglichkeit, sich selbstständig fortzubewegen, sind wichtige Bausteine für die körperliche und geistige Entwicklung.


Kinder mit Bewegungseinschränkungen haben oft kaum die Möglichkeit, sich selbstständig zu bewegen, und in aufrechter Haltung fällt dies umso schwerer.

Diese Kinder benötigen eine an ihre Bedürfnisse angepasste Unterstützung. In einer korrigierten Aufrichtung können sie ihren Bewegungsdrang ausleben und in Fortbewegung umsetzen.

Kinder mit Diagnosen wie Zerebralparese, neuromuskulären Syndromen, Spina Bifida und ähnlichen Bewegungsstörungen bekommen eine einzigartige Möglichkeit ihre Welt aktiv zu entdecken.

Therapeutischer Nutzen:

- Mit dem NF-Walker 2 ist es möglich, sich ohne fremde Hilfe fortzubewegen und am Alltagsleben teilzunehmen. Dabei bleiben die Hände frei.
- In aufrechter, korrigierter Haltung werden wechselseitige Schrittbewegungen, unter Gewichtsübernahme, unterstützt.
- Der NF-Walker 2 mit seinen individuellen Einstellungsmöglichkeiten bietet auch Kindern mit schweren Behinderungen die Möglichkeit zu mehr Bewegung.
- Schulung und Nachbetreuung sind fester Bestandteil einer Versorgung.

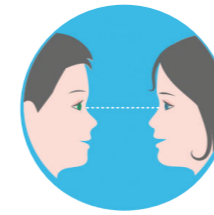

SOZIALE INTERAKTION auf Augenhöhe sichert die Teilhabe am Alltag und vereinfacht die Kommunikation



Der Wechsel in eine aktive aufrechte Position **FÖRDMT DEN HAUTSTOFFWECHSEL** und kann Druckstellen durch langes Sitzen vermeiden



ATMUNG UND BLUTKREISLAUF werden durch die körperliche Aktivität in aufrechter Haltung positiv beeinflusst



AKTIVES STEHEN ist physisches Training unter achsengerechter Belastung



Die **FUNKTION DES VERDAUUNGSSYSTEMS** wird durch die Bewegung in aufrechter Haltung angeregt



Die **DEHNUNG DER MUSKULATUR und STRECKUNG DER GELENKE**, wirken vorbeugend gegen weiterführende Kontrakturen und Deformitäten und reguliert den Muskeltonus



In der aktiven aufrechten Position sind Menschen wacher und aufmerksamer, dies fördert die **KOGNITIVEN FÄHIGKEITEN**



Gewichtsübernahme, Muskelaktivität und ein erhöhter Stoffwechsel verbessern die **KNOCHENDICHTE**

Jüngste Forschungsergebnisse haben gezeigt, dass sich Bewegung sehr positiv auf die Gesundheit von Menschen mit Zerebralparese auswirkt, die den Tag sonst überwiegend in sitzender Position verbringen. (Verschuren et al., 2016; Katzmarzyk, 2010)

WAS IST NEU?

Das kann der neue **NF-Walker 2**

Vereinfachtes Handling

- Verbesserter Aufnahmemechanismus zwischen Schienensystem und Chassis



Verbesserte Positionierung des Beckens

- Unterstützt die Bewegung im Hüftgelenk
- Optimierte Haltepunkte



Geringere Druckbelastung an Kontaktstellen

- Kniepelotten
- Rumpfunterstützung
- Beckenführung



Leichteres Korrigieren der Haltung des Nutzers

- Größerer Einstellbereich
- Stabilere Beinschienen



Zugelassen für die Nutzung im Außenbereich




Aufnahmemechanismus für Zubehör

- Abnehmbar
- Universell einsetzbar für Therapietisch und Aufrichthilfe



Dynamische Kniegelenksunterstützung

- Individuell einstellbar
- Unterstützt die Streckung bei Hypotonie
- Verhindert die Überstreckung

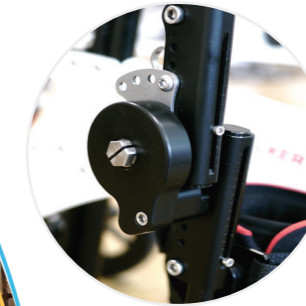

Verbessertes Abduktion-Hüftgelenk

- Einstellbar von 0°-12°
- Ermöglicht freie Bewegung von 1°-12°



Geradauslauf

- Arretierung der Vorderräder unterstützt das Erlernen des Gehens auf gerader Linie



Rotationseinstellung an der Oberschenkelschiene

- Ermöglicht die Positionierung in Außenrotation
- Ermöglicht limitierte Bewegung in Außenrotation



MODELLGRÖSSEN

	Körpergröße	Körpergewicht	
XS	70 – 110 cm*/**	max. 30 kg	HMV-PosNr.: 10.46.02.3007
S	100 – 140 cm**	max. 40 kg	

* Micro-Kit erhältlich als Zubehör bei Körpergrößen von 70-80 cm

** Individuell in Abhängigkeit von Funktionalität und Körperproportionen des Nutzers oder der Nutzerin zu beurteilen



ZUBEHÖR

Kopfstützensysteme (XS, S)



- Viele Kopfstützensysteme (Standard und individuell) können für den NF-Walker angepasst werden

Therapietisch (XS, S)



- Für Spiele und Spielzeug
- Ermöglicht soziale Interaktion mit anderen Kindern
- Ermöglicht das Abstützen mit beiden Händen sowie der Unterarme
- Gibt dem Benutzer mehr Sicherheit

Aufrichthilfe (XS, S)



- Erhöht die Rumpfstabilität
- Fixierte Handposition für mehr Stabilität
- Gibt dem Benutzer mehr Sicherheit

Aufrichthilfen seitlich (XS, S)



- Ermöglichen eine natürliche Handposition
- Erhöhen die Rumpfstabilität
- Geben dem Benutzer mehr Sicherheit
- Trainieren den Nutzer für das Gehen am Rollator

Steuerung (XS, S)



- Erhöht das selbstbestimmte Handeln und das Gefühl von Unabhängigkeit
- Wirkt stimulierend auf die Hand- und Armfunktionen
- Wirkt stimulierend auf die kognitiven Fähigkeiten des Benutzers
- Verbessert die soziale Interaktion mit anderen Kindern

Abduktions-Hüftgelenk (XS, S)



- Einstellbar von 0 bis 8 Grad auf jeder Seite
- Abduzierte Position der Beine beugt einer Hüftluxation vor
- Gibt sicheren und stabilen Halt



Schreithilfe (XS, S)

- Trainiert die Schrittauslösung und den reziproken Gang
- Führt das Kind in einer Schrittbewegung

Liferaufhängung (XS, S)



- Vereinfacht den Transfer des Benutzers für den Betreuer
- Nutzung der meisten Liftsysteme möglich
- Beugt Verletzungen oder Erkrankungen der betreuenden Personen vor, die durch dauerhaftes schweres Tragen entstehen können

Lenkhilfe (XS, S)



- Vereinfacht die Begleitung durch eine betreuende Person
- Höhenverstellbar
- In zwei Größen verfügbar
- Unterstützt den Nutzer beim Lenken

Höhenverstellbare Mittelstange (S)



- Vereinfacht den Transfer des Benutzers
- Weniger Hebeunterstützung durch Betreuer erforderlich
- Verbessert den Transfer des Benutzers auf unebenen Böden

Einstiegs- und Entlastungshilfe (XS, S)



- Erleichtert den Transfer in den und aus dem NF-Walker
- Ermöglicht kurze Pausen während des Trainings

Überstreckschutz für das Kniegelenk (XS, S)



- Überstreckung des Kniegelenks wird verhindert

Dynamische Kniegelenksunterstützung (S)



- Einstellbar zur Unterstützung der Kniestreckung oder Kniebeugung

Rotationseinstellung des Schienensystems (S)



- Einstellbare Außenrotation der Beinschienen
 - in fester Position oder
 - in freier Rotation um bis zu 10 Grad

WEITERES ZUBEHÖR



Micro-kit

- Angepasst für Nutzergrößen ab 70 cm (kleinere Räder, adaptierte Bremse, kürzere Mittelstange, kürzere Beinschienen)



Nackensstütze (S, M, L)

- Positionierung des Kopfes
- In drei Größen verfügbar



Betreuung

Bei der Versorgung mit dem NF-Walker 2 sind regelmäßige Änderungen und Instandsetzungen des Gerätes durch die Firma Made for Movement GmbH fester Bestandteil.

Kompetente und therapeutisch geschulte Mitarbeiter sind immer auf dem neuesten Stand der Produkte.

Sie leiten an, beraten, motivieren und passen die Hilfsmittel individuell so an, dass die Nutzung bestmöglich gewährleistet werden kann.

HIER KOMMT SARA!

Sara ist vier Jahre alt. Sie leidet an einem erblich bedingtem Stoffwechseldefekt (CDG-Syndrom). Sie kann nicht allein sitzen, stehen oder gehen. Als Sara ihren NF-Walker bekam, nutzte sie ihn mit Unterstützung durch Schreithilfen, um die Bewegung zu steuern.

Nach einiger Zeit machte sie selbst die ersten Schritte, und jetzt jauchzt sie vor Freude, wenn sie sich fortbewegen kann.

“ Seit einiger Zeit testet Sara den neuen NF-Walker 2. Am besten gefällt ihr - außer dem schicken und coolen Design - der neue Beckengurt, der ihr Becken zuverlässig hält. Der Gurt sitzt nun etwas höher, die Hüfte kann frei bewegt werden, und trotzdem wird Sara sicher gehalten, ohne dass sie die Bruststütze braucht. ”

ARZT



HIER KOMMT MARTINE!

Das ist die fünfjährige Martine, bei der ein EDS-Syndrom und eine unspezifische Enzephalopathie diagnostiziert wurden. Sie kann zwar nicht allein laufen, aber sie erkundet neugierig ihre Umgebung und krabbelt viel herum. Seit sie zweieinhalb Jahre alt ist, nutzt sie einen NF-Walker. In den letzten vier Monaten hat sie die neue Version getestet, den NF-Walker 2.

Sowohl ihre Eltern als auch die Erzieher im Kindergarten beschreiben den NF-Walker 2 als außerordentlich stabil und robust. Auch dank der neuen Polsterung, fühlt sich Martine darin sichtlich wohl. Außerdem kann sie mit der neuen Sitzlösung in sitzender Position in das Schienensystem transferiert werden und muss sich dafür nicht mehr hinlegen. Das bedeutet, dass sie sich schon am Transfer in das Schienensystem aktiv beteiligen kann.

“ Der Transfer in den neuen NF-Walker 2 geht für Martine jetzt noch leichter und schneller vonstatten, weil sie aktiv mithelfen kann. ”

ERZIEHERIN

VERTRIEB

- Deutschlandweiter Direktvertrieb
- Langjährige Markterfahrung seit 1999
- Kompetente und therapeutisch geschulte Mitarbeiter
- Betreuung vor Ort
- Mietkonzept
- Enge Zusammenarbeit mit Ärzten, Therapeuten und Anwendern
- Kooperationen mit renommierten Sanitätshäusern und Kliniken im Bereich der Kinder- und Jugend-Rehabilitation

Für weitere Informationen
wenden Sie sich bitte an:

Made for Movement GmbH
Niedersachsenstraße 25a
30853 Langenhagen
GERMANY

☎ +49 (0) 511-234 81 60

✉ info.de@madeformovement.com

🌐 www.madeformovement.com/de

 **made for
movement**