

INNOWALK 2

Ermöglicht Aktivität - jeden Tag

TRANSFER-KURZANLEITUNG





Pre-check

Eine Vorabprüfung dient dazu, Verschleiß an wichtigen Teilen zu erkennen. Die wichtigsten Teile werden täglich vor dem Gebrauch überprüft. Andere Teile werden einmal im Monat auf Verschleiß überprüft.



Für weitere Tipps zur Durchführung der Pre-Checks scannen Sie den QR-Code und lesen Sie die Anweisungen zur Vorabüberprüfung.



Vorbereitungen für den Transfer

- Schalten Sie das Gerät ein
- Bringen Sie den Innowalk in die Sitzposition
- Schwenken Sie die Beinstützen zur Seite und versenken Sie sie (A)
- Öffnen Sie alle Gurte, den Brust- sowie die Hüftstütze, lockern Sie den Führungsgurt


Bei Nutzung des Schwenksitzes für eigenständigen Transfer

- Positionieren Sie die Fußplatte an der Einstiegsseite auf der untersten Position in Laufrichtung
- Drehen Sie den Schwenksitz zur Einstiegsseite (B)
- Stellen Sie den Sitz per Fernbedienung auf die gewünschte Höhe ein für den einfachen Transfer aus dem Rollstuhl (Größen M & L)

Bei Nutzung eines Lifters für den Transfer

Verwenden Sie die Kippfunktion, um den „Beinen“ des manuellen Personenlifters den Zugang unter den Innowalk zu ermöglichen (nicht erforderlich, wenn ein Deckenlifter verwendet wird).

A

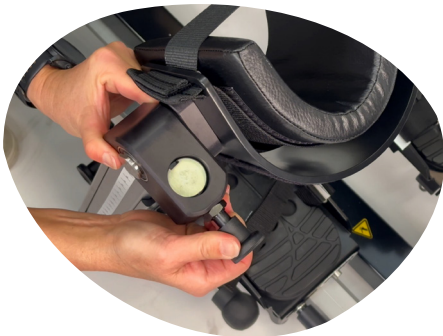

Ziehen Sie den Griff (1), heben Sie ihn an (2) und schwenken Sie die Beinschiene weg.



Ziehen Sie den Griff (1) heraus und senken Sie die Beinschiene ab.

B



Drücken Sie den Griff (1) nach unten und drehen Sie den Sitz.

Transfer in den Innowalk 2

- Transferieren Sie den Nutzer auf den Sitz und stützen Sie ihn, bis er durch die Bruststütze gesichert ist.
- Befestigen Sie die Bruststütze und legen Sie den Hüftgurt locker an
- Wenn der Schwenksitz verwendet wird, erhöhen Sie die Sitzhöhe und drehen Sie den Sitz nach vorne (C)
- Leeren Sie die Fußgurte an (D)
- Legen Sie die Beinschienen an (E)
- Legen Sie den Führungsgurt an (F) und ziehen Sie ihn bis zur gewünschten Länge fest
- Bringen Sie den Benutzer aus der Sitzposition in die definierte Stehposition
- Legen Sie den Hüftgurt im Stehen an (G)



Transfer aus dem Innowalk 2

- Lösen Sie den Hüftgurt
- Bringen Sie den Innowalk in die Sitzposition
- Lösen Sie die Fußgurte
- Lösen Sie den Führungsgurt und schwenken und versenken Sie die Beinschienen

Bei Nutzung des Schwenksitzes für eigenständigen Transfer

- Drehen Sie den Schwenksitz zur Ausstiegsseite
- Senken Sie den Sitz bis zur gewünschten Transferhöhe
- Lösen Sie die Bruststütze
- Transferieren Sie den Nutzer aus dem Gerät


Bei Nutzung eines Lifters für den Transfer

- Befestigen Sie die Aufhängungen am Lifter
- Lösen Sie die Bruststütze
- Transferieren Sie den Nutzer aus dem Gerät

INNOWALK 2

**Wenden Sie sich gerne an Ihr Made
for Movement-Team, wenn Sie
Unterstützung bei der Nutzung des
Innowalk benötigen**

 + 49 (0) 511-234 81 60

 madeformovement.com/de

Druckfehler vorbehalten / MfM-DE-0324 / © 2024 Made for Movement AS Alle Rechte vorbehalten.